

Model 2800-2805

Podnośnik sufitowy

Efektywny i szybki



- Najszybszy podnośnik sufitowy
- Odpowiedni do intensywnego używania
- Płynny ruch do przodu/do tyłu
- Do użytku z siedziskiem Body Support oraz z kamizelkami transferowymi
- Do użytku z klasycznym wieszakiem lub z elektrycznym wieszakiem uchylnym
- Indywidualnie projektowane systemy szynowe umożliwiają dostęp do każdego miejsca
- Dostępny bezprzewodowy pilot na podczerwień
- Sterowanie awaryjne na obudowie podnośnika
- System awaryjnego opuszczania i zatrzymania w zasięgu ręki

Systemy podnoszenia i pielęgnacji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

www.handimove.pl

Podnośnik sufitowy

Dane techniczne

Dopuszczalne obciążenie robocze (SWL)	200 kg (3000 mm pas nośny: 160 kg)
Akumulatory	2 x 12 V 8 AH
Długość pasa nośnego	2000 mm (opcjonalnie: 3000 mm)
System szyn	aluminium lakierowane na biało
Płynny start i zatrzymanie	elektroniczne
Obudowa	ABS
Awaryjne opuszczanie	mechaniczne
Pilot 2800	wodoszczelność w klasie IP67
Pilot 2805	podczerwień
Ilość podniesień z w pełni naładowanymi akumulatorami	160
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	sygnalizacja wizualna i dźwiękowa
Ładowarka	parametry zasilania 0.9 A 100-240 Vac, 50-60 Hz Class II
	parametry wyjściowe 24 Vdc Max 1.3 A (9940) Max 1.2 A (2541)

Prędkość


Prędkość podnoszenia

Obciążenie 5 kg	6,00 cm/sec
Obciążenie 100 kg	5,80 cm/sec
Obciążenie 200 kg	4,60 cm/sec

Prędkość opuszczania

Obciążenie 5 kg	6,00 cm/sec
Obciążenie 100 kg	6,20 cm/sec
Obciążenie 200 kg	6,60 cm/sec

Przykładowe rozwiązania

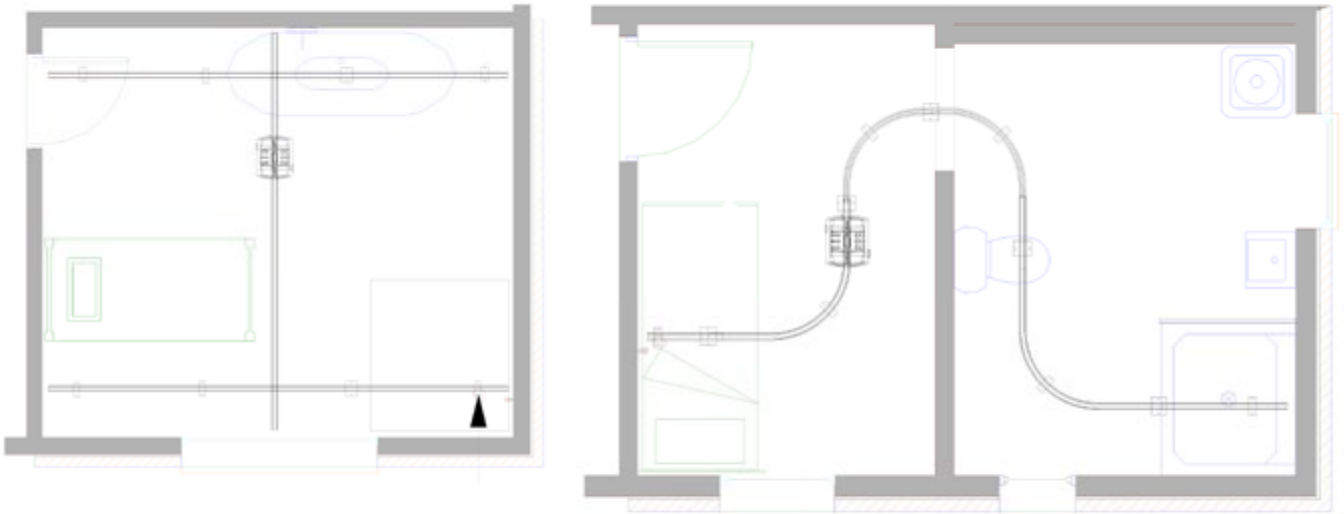

Dostępne warianty*

2800


Silnik podnoszący (górną/dół)
Z elektrycznym pilotem przewodowym

2805 IR

Silnik podnoszący (górną/dół)
Z bezprzewodowym pilotem na podczerwień

* również dostępne z silnikiem jezdny (2810 L - 2815 L IR)

Bezpłatna prezentacja i szczegółowe informacje:



© 21-01-2025 • Handi-Move • v.1.9

Promed Dom Bez Barier

Pl. Św. Józefa 1 - 89-600 Chojnice - Polska
kontakt@dbbpromed.pl • +48 572 774 784 • www.handimove.pl